
SANTÉ

Bruksanvisning

COMFORT Go
Massagekudde

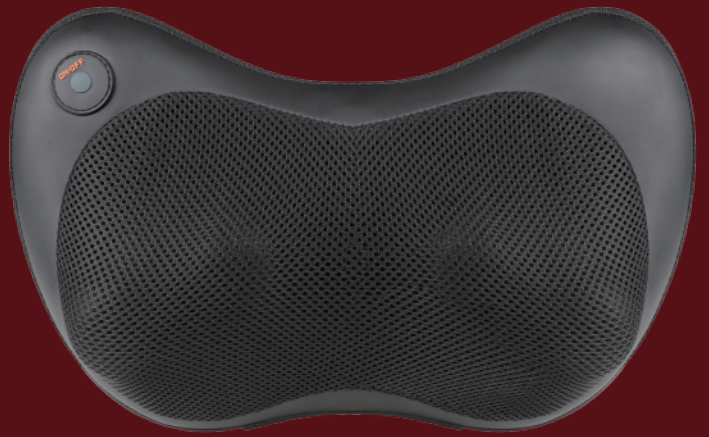

SANTÉ

Santé Sweden AB
Telefon: +46 20 27 27 20
www.massageprodukter.se

Vi gratulerar till ditt köp av Massagekudde COMFORT Go.

Genom ditt val av denna massageprodukt från Santé har du tagit ett medvetet steg mot bättre hälsa, ökat välbefinnande och en mer balanserad vardag. Vi är stolta över att få vara en del av din resa mot ökad hälsa, återhämtning och livskvalitet.

Santé strävar efter att erbjuda innovativa och högkvalitativa produkter inom hälsa och välmående. Med fokus på modern teknik, genomtänkt design och användarvänlighet utvecklar vi lösningar som hjälper dig att ta hand om både kropp och sinne – oavsett om det gäller avslappning efter en lång dag eller regelbunden egenvård.

Våra produkter är framtagna med omsorg och noggrant utvalda komponenter för att säkerställa både funktion, hållbarhet och komfort. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och vidareutveckla vårt sortiment för att möta våra kunders behov och förväntningar.

För att du ska få ut maximalt av din produkt och kunna njuta av dess fördelar under lång tid rekommenderar vi att du läser igenom och följer bruksanvisningen noggrant. På så sätt säkerställer du både optimal användning och en trygg upplevelse.

Tack för att du har valt Santé – vi önskar dig många avkopplande och välgörande stunder!

INNEHÅLL

Beskrivning----------/sida 1

Säkerhetsanvisningar ----------/sida 1

Beskrivning ----------/sida 2

Produktbeskrivning ----------/sida 3

Användningsinstruktion ----------/sida 3

Fördelar ----------/sida 3

Tekniska data ----------/sida 4

Beskrivning

Oavsett om du vill ha snabb avkoppling i vardagen eller lindring för spända och stela muskler i rygg, nacke eller axlar, erbjuder COMFORT Go en effektiv och behaglig massage.Denna portabla massagekudde med värmefunktion ger djupgående avslappning för nacke, axlar, rygg, armar och ben – för en helkroppskänsla av välbefinnande i ditt eget hem.Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsvarningar

- För inte in föremål i öppningen mellan massagehuvud och hölje.
- Utsätt inte produkten för vatten – risk för kortslutning.
- Använd inte produkten om kabel eller kontakt är skadad. Försök inte reparera själv.
- Kontakta återförsäljare eller service vid behov av reparation.
- Använd endast strömkälla som uppfyller produktens specifikationer.
- Koppla ur produkten efter användning och före rengöring.
- Följ alltid instruktionerna i denna manual.
- Använd endast rekommenderade tillbehör.
- Använd inte produkten utomhus.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Använd inte produkten om du är påverkad av alkohol, droger eller mår dåligt.
- Använd inte överdrivet tryck.
- Använd inte produkten inom en timme efter måltid.
- Vid skador eller nyligen genomförd operation – rådgör med läkare före användning.


Användningsmiljö

- Använd inte produkten i mycket fuktiga miljöer, såsom badrum.
- Undvik användning vid snabba temperaturförändringar.
- Använd inte i dammiga eller korrosiva miljöer.

Ej lämplig för

- Personer med hudinfektioner
- Personer med benskörhet
- Personer med hjärtproblem eller medicinska implantat (t.ex. pacemaker)
- Personer med hög feber
- Gravida eller menstruerande
- Personer med skador eller hudsjukdomar
- Barn under 14 år utan tillsyn
- Personer som enligt läkare bör vila eller undvika belastning
- Använd inte produkten på våt hud.
- Produkten kan bli varm – var försiktig om du har nedsatt känsel för värme.

Produktbeskrivning

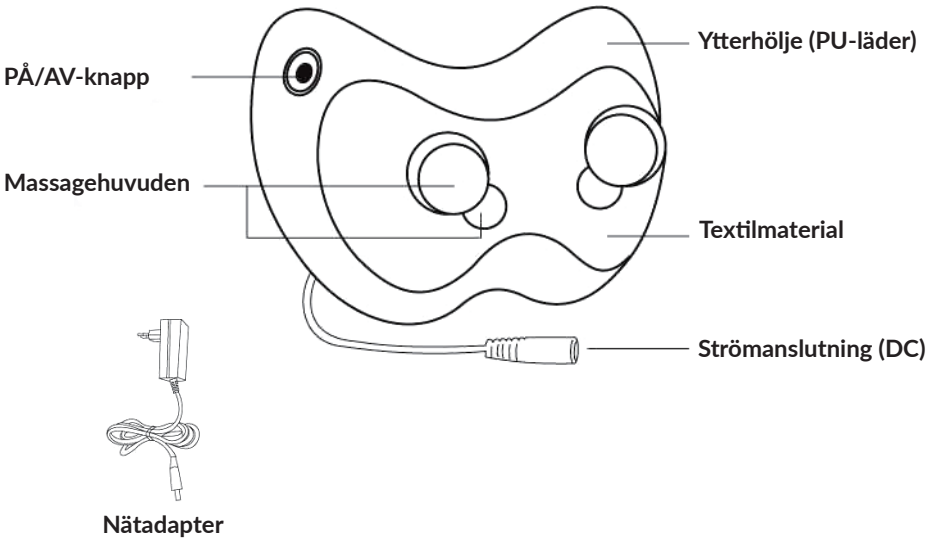

Användningsinstruktion

1. Säkerställ att produkten används i en trygg och säker miljö.
2. Anslut strömkabeln till nätadapter och vägguttag.
3. Tryck på PÅ/AV-knappen för att starta massage och värmefunktion.
4. Massagehuvudena roterar medurs och moturs och byter automatiskt riktning varje minut.
5. Dubbeltryck på PÅ/AV-knappen för att manuellt ändra rotationsriktning.
6. Tryck på PÅ/AV-knappen för att stänga av värmefunktionen, tryck igen för att aktivera den.
7. Håll in PÅ/AV-knappen i cirka 3 sekunder för att stänga av enheten.
8. Koppla ur enheten efter användning.

Användningsområden

- Nacke
- Rygg
- Mage
- Lår
- Armar
- Vader

Fördelar

- Förbättrar blodcirkulationen
- Minskar muskelspänningar och värk
- Stimulerar kroppens ämnesomsättning
- Bidrar till avslappning och minskad stress

Tekniska data:
Produkttyp: Massagekudde
Produktnamn: COMFORT Go
Artikelnummer: MP-P11C-N-1
Spänning: DC 9 V
Effekt: 18 W
Användningstid: ca 15 min.

Santé Sweden AB
Org. nr. 556646–7154
Telefon: +46 20 27 27 20
www.massageprodukter.se

EU-försäkran om överensstämmelse

Överensstämmer med europeiska regelstandarder EMC 2014/30/EU och LVD 2014/35/EU.

Garantivillkor:

Återförsäljaren hanterar den lagstadgade garantiperiod för den produkt som beskrivs i denna manual. Garantin gäller från inköpsdatumet. Inköpsdatumet ska styrkas med försäljningskvittot. Återförsäljaren ska kostnadsfritt reparera eller byta ut defekta produkter under garantiperioden. Vanligt slitage täcks inte av garantin. För att nyttja garantirätten returnerar du den defekta produkten innan garantiperiodens slut. Garantin gäller inte om det anses att skadan på produkten uppkommit genom yttre påverkan, eller som ett resultat av reparation eller förändring som inte utförts av tillverkaren eller den auktoriserade återförsäljaren. Garantin från återförsäljaren är begränsad till reparation eller utbyte av produkten. Enligt denna garanti har tillverkaren eller säljaren inget ytterligare ansvar och ansvarar inte för skador orsakade av åsidosättning av bruksanvisningen och / eller felaktig användning av produkten. Om säljarens undersökning av produkten avslöjar att garantikravet relaterar till en defekt som inte täcks av garantin, eller att garantiperioden har löpt ut, ska kostnaderna för undersökning och reparation tillfalla kunden.

Följande orsaker täcks inte av garantin:

- Slitagedelar som tygöverdrag, överdrag eller kåpa.
- Slitage orsakat av felaktig användning.
- Kommersiell användning t.ex. användning på mässor/utställning, upprepad användning utan mellanliggande pauser på 40 minuter.
- Utsättning av enheten för värme, fuktighet eller vätskor.
- Skador på grund av vassa föremål.
- Oönskad förstörelse, överbelastning eller oavsiktlig skada.
- Skador och nedsmutsning av husdjur.
- Kontaminering orsakad av kropps- eller hårvårdsprodukter.
- Skador orsakade av användning av syror, lösningsmedel eller alkohol.

Juridiska anmärkningar: Innehållet i denna manual gör inga påståenden om helande eller läkande effekter. Diagnos och behandling av sjukdomar och andra fysiska åkommor kräver behandling av en läkare, icke-medicinska utövare eller terapeut. Alla uttalanden är strikt informativa och får inte användas som ett substitut för en professionell medicinsk behandling. Varje användare är förpliktigad att genom noggrann undersökning och, om så krävs, samråda med en specialist avgöra om produkten är rätt för deras specifika fall. Varje användning sker på användarens egna risk. Vi tar avstånd från alla läkande påståenden eller löften.


Upphovsrättsskyddade bilder och text omfattas av Santé Sweden AB:s upphovsrätt och får inte användas utan uttrycklig bekräftelse. Copyright © 2026 Santé Sweden AB. Alla rättigheter förbehålls.

Notes

SANTÉ

Instruction manual

COMFORT Go
Massage pillow

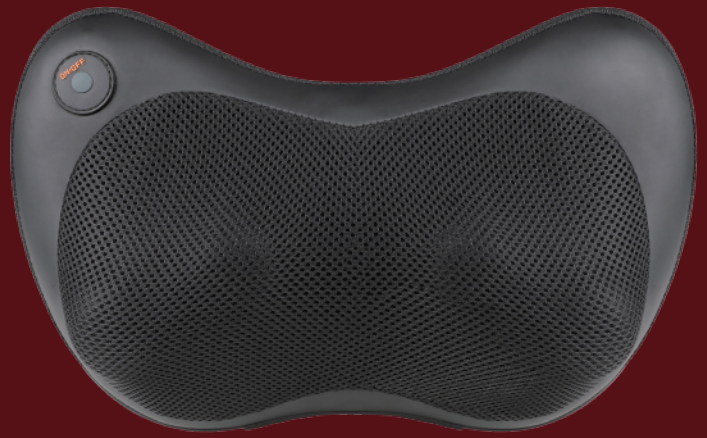

Congratulations on your purchase of Maassage pillow COMFORT Go.

By choosing this massage product from Santé, you have taken a conscious step toward better health, enhanced well-being, and a more balanced everyday life. We are proud to be part of your journey toward recovery and improved quality of life.

Santé is committed to providing innovative and high-quality products in the field of health and wellness. With a focus on modern technology, thoughtful design, and user-friendliness, we develop solutions that help you care for both body and mind—whether for relaxation after a long day or as part of your regular self-care routine.

Our products are developed with care and carefully selected components to ensure functionality, durability, and comfort. We continuously strive to improve and further develop our range to meet our customers' needs and expectations.

To ensure you get the most out of your product and can enjoy its benefits for a long time, we recommend that you read and follow the user manual carefully. This will help ensure optimal use and a safe experience.

Thank you for choosing Santé — we wish you many relaxing and rejuvenating moments!

CONTENTS

Description ----------/page 1

Safety precautions ----------/page 1

Product illustration----------/page 2

Operation instructions----------/page 3

Application ----------/page 3

Benefits ----------/page 3

Technical data ----------/page 4

Description

Whether you're looking for a quick relaxing fix from the hustle and bustle of everyday life or some serious relief from the stubborn knots that just won't quit on your back, neck, etc. the COMFORT Go is the electric massager that banishes the aches for relaxation anytime, anywhere. This portable massager with heat therapy makes for excellent relief on your neck, shoulders, back, legs, arms, or thighs, for that full-body massage therapy in the comfort of your own home.

Safety Precautions

Important safety Warning

- Do not insert debris into the gap between the massage head and the shell.
- Do not splash water on the product to avoid accidents caused by short circuit.
- If the power cord or plug is damaged, do not disassemble by yourself and do not repair it without authorization.
- Please contact the dealer in time for maintenance.
- Please use a power source matching this appliance.
- Please unplug the power plug after use or before cleaning to avoid causing equipment or personal damage.
- Please follow the instructions in this manual to use this massager.
- Do not use unrecommended accessories and accessories.
- Do not use this massager outdoors.
- Do not use the appliance in case of damaged enclosure or power cord.
- Do not use this massager when you are drunk or feel unwell.
- Do not use the appliance with excessive force to avoid injury.
- Do not use this product within one hour after meals.
- For patients with hand injury or recent hand operation, please follow the doctor's instructions and use carefully.


Use environment

- Do not use the massager in a highly damp environment such as the bathroom.
- Do not use the massager immediately when the ambient temperature changes sharply.
- Do not use the massager in severe flying dust or corrosive gas environment.

People who are not suitable to use this device

- People with skin infections.
- Osteoporosis patients.
- Patients with heart problems and wearing electronic medical devices such as pacemakers.
- People with high fever.
- Pregnant or menstruating women.
- People with physical trauma or surface diseases.
- Children under the age of 14 and those who are insane are not allowed to use this product without supervision.
- Require rest or feel unwell as advised by the doctor.
- Do not use this massager when the body is wet.
- The appliance has a heating surface and please attention and carefully use to those people who are not sensitive to heat.

Product illustration

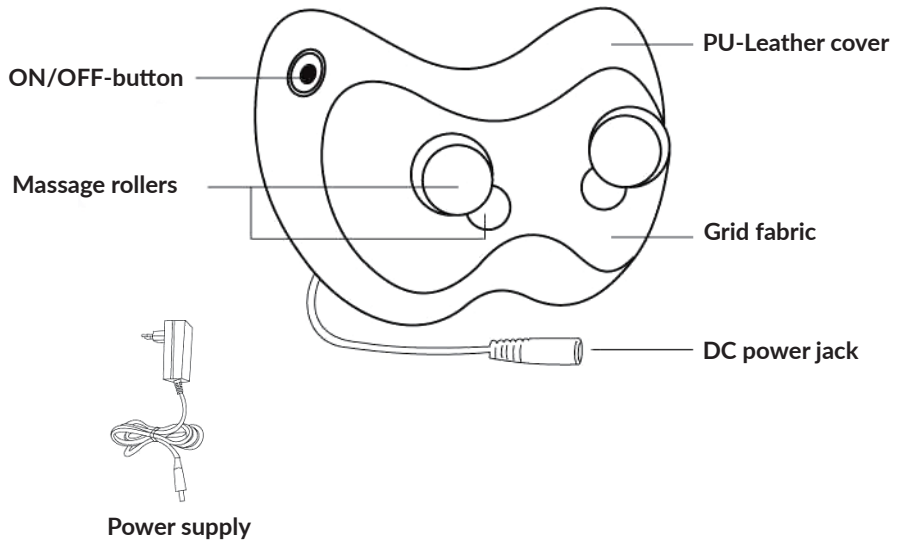

Operation instructions

1. Make sure the massager is operated under safe environment.
2. Insert the power plug into the car plug adapter or wall socket.
3. Press the ON/OFF-button to start the massager and thermal therapy function.
4. The massage rollers will rotate in clockwise and counterclockwise, and the rotation direction will change automatically every 1 minute.
5. Double press the ON/OFF-button, and the massage rollers will change the rotation direction and the manual steering is on.
6. Press the ON/OFF-button to stop the thermal therapy function and press the button again to start the function.
7. Press and hold the ON/OFF-button for 3s to turn off the massager.
8. Unplug the massager.

Application

- Neck
- Back
- Stomach
- Thighs
- Arms
- Calves

Benefits

- Improve blood circulation
- Alleviate muscle tension/aches
- Improve metabolic system
- Relieve stress and fatigue

Technical data:
Product type: Massage pillow
Product name: COMFORT Go
Article no. MP-P11C-N-1
Output voltage: DC 9 V
Power consumption: 18 W
Timer: 15 min.

Santé Sweden AB
VAT: SE556646715401
Phone: +46 20 27 27 20
www.massageprodukter.se

EU Declaration of Conformity

Compliant with European regulatory standards EMC 2014/30/EU and LVD 2014/35/EU.

Warranty Conditions:

The retailer guarantees a statutory period of warranty for the product described on the reverse. Warranty is valid from the date of purchase. The purchase date must be documented with proof of purchase. The retailer will repair or replace free-of-charge all items covered in each market for which faults have been discovered. A prerequisite is that you send the faulty device with proof of purchase before the guarantee or warranty period expires. The warranty claim shall not be applicable if a fault is established which has arisen e.g. due to external influences or as a consequence of a repair or modification which was not carried out by the manufacturer or an authorised dealer.

The following points are not part of the warranty:

- Wear parts, e.g. abrasives, working synthetical parts, fabric covers, overlay / cover
- Wear caused by improper use
- Commercial use e.g. exhibition use, repeated use without intermediate breaks of 40 minutes
- Exposing the device to heat, humidity of liquids
- Damage due to sharp and/or sharp-edged objects
- Wanton destruction, misappropriation, overloading or accidental damage
- Damage and soiling by domestic animals
- Contamination caused by body or hair care products
- Damage caused by use of acids, solvent or alcohol agents

The warranty granted by the retailer is limited to repair and exchange of the product. Under this warranty, the manufacturer or the retailer shall have no further liability and are not responsible for damages which have arisen due to disregard of the operating instructions and /or improper use of the product. Where upon examination of the product by the manufacturer it is found that the warranty request does not concern a defect covered by the warranty or that the warranty period has expired, the customer must bear the costs for the inspection and repair.As manufacturer, Casada ensures the delivery of faultless goods to buyers/partners. Proven production faults are entitled to an exchange after registration and confirmation.

Legal note: All contents do not contain healing statements. The diagnosis and treatment of illnesses and other physical disorders require a treatment by a physician, non-medical practitioner or therapist. The statements are strictly informative and may not be used as a substitute for a professional medi-cal treatment. Every user is beholden to ascertain by accurate examination and, if required, after consultation of a specialist, if the application is the right one for their specific cases. Each dose or application takes place at the risk of the user. We dissociate ourselves from any healing statements or promises.

Copyright pictures and text are subject to the copyright of Santé Sweden AB. and may not be used without explicit confirmation. Copyright © 2026 Santé Sweden AB. All rights reserved.